



video Cách sử dụng

Sản phẩm dùng cho nội soi

Làm nóng, lau và chống mờ đầu ống kính

LAPAHOT®

Chứa chất hoạt động
bề mặt giúp lau sạch
bụi bẩn!!

Quy trình
thông thường

Step
1

Làm nóng



Đặt thấu kính vào nước muối sinh lý
trong chai thép không gỉ và đun nóng

Step
2

Lau sạch



Dùng gạc lau sạch kính đã rửa

Step
3

Chống mờ



Bôi chất chống làm mờ kính
(sau đó lau bằng gạc)

LAPAHOT® Cải tiến mới so với

Quy trình thông thường

Hoàn thành chỉ với một bước

Các bước trước khi phẫu thuật


Mở sản phẩm
Lapahot®

Để yên trong khoảng **20 phút**

*Khoảng thời gian
tăng lên nhiệt độ
thích hợp

Khoảng 7 giờ

Chỉ cần đưa đầu ống
nội soi vào và giữ
thiết bị đứng yên!

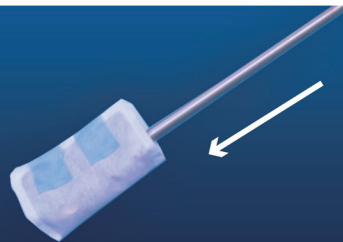

Trước khi dùng LAPAHOT®



Sau khi dùng LAPAHOT®



Tầm nhìn tốt chỉ với **một lần sử dụng**

*Có kèm theo băng keo cố định

LAPAHOT®

Sản phẩm làm nóng, lau và chống mờ dành cho đầu ống kính nội soi

Hỗ trợ tầm nhìn tốt trong phẫu thuật nội soi

Đặc điểm

- Làm nóng, lau và chống mờ kính chỉ với một lần sử dụng
- Giảm đáng kể các vật dụng chuẩn bị (nước muối sinh lý được làm nóng đến 65°C, chai thép không gỉ, chất chống mờ), v.v.
- Giảm nhiệm vụ hỗ trợ cho y tá và kỹ thuật viên trong phòng phẫu thuật
- Không có nguy cơ làm hỏng ống kính đầu khi lắp ống soi (So với chai thép không gỉ, đầu thấu kính sẽ không chạm vào miệng của chai khi đưa vào/lấy ra và gây hư hỏng khi lắp ống soi)

Chuẩn bị trước khi tiến hành phẫu thuật

STEP 01

Khi y tá lấy dụng cụ ra và bắt đầu chuẩn bị, hãy mở gói sản phẩm và lấy Lapahot® ra khỏi túi.




STEP 02

Bóc lớp giấy nhả đồng thời tháo băng cố định bằng cách xoắn nó, gấp đôi Lapahot® và cố định bằng băng dính.



STEP 03

Đưa đầu ống nội soi vào bên trong, để yên trong khoảng 20 phút và đi vào khoang bụng.

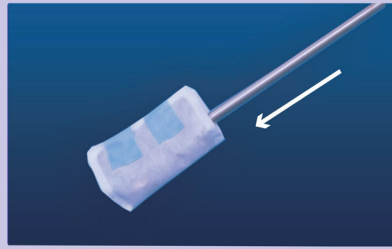

Nếu đầu ống kính bị bẩn

Nếu ống soi bị bẩn trong quá trình phẫu thuật, hãy lau đầu ống soi bằng gạc ướt, v.v., sau đó làm nóng ống soi bằng Lapahot® trong khoảng 3 đến 5 giây.



*Khi đó, bằng cách chà nhẹ vào bên trong, có thể loại bỏ ngay cả bụi bẩn nhỏ bằng chất hoạt động bề mặt được tẩm trên bề mặt và đồng thời làm nóng đầu.

Tham khảo



*Nếu đầu ống kính bị lạnh khi lau ống kính, ống kính có thể bị mờ nếu bạn đưa ống kính vào khoang bụng mà không làm ấm ống kính. Trong trường hợp đó, Lapahot® có thể làm nóng đầu ống kính đồng thời làm sạch bề mặt ống kính.

\ Lưu ý /

Nếu bạn cọ xát mạnh vào một vật sắc nhọn (chẳng hạn như kính soi cứng), vải không dệt có thể bị rách



Nếu bên trong Lapahot® bị bẩn

Nếu bụi bẩn ở bên trong nhiều lần, có thể loại bỏ bụi bẩn và hơi mờ ống nội soi bằng cách sử dụng vải không dệt ở bên ngoài (không có sự khác biệt giữa vải không dệt ở bên trong và bên ngoài).

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Tiêu chuẩn (đơn vị: cm)	Đơn vị	Quy cách đóng gói	Mã JAN
84412	Lapahot® (y)	Bao gồm: - Lapahot®: Khoảng 13,2 x 10 - 1 miếng - Băng keo cố định: Khoảng 7 x 2,5 - 2 miếng - Hướng dẫn sử dụng - 1 tờ	Túi	100 túi (25 túi x 4 hộp)/thùng	4904820844126

● Chất liệu: [LAPAHOT®] Thành phần: Bột sắt, nước, than hoạt tính, nhựa hút nước, muối, vermiculite; Chất liệu bề mặt: Vải không dệt spunbond nylon (tấm chất hoạt động bề mặt) [Băng cố định] Polypropylene ● Không chứa latex

- Nhiệt độ tối đa: Khoảng 73°C (*)
- Thời gian: Khoảng 7 giờ (Thời gian kéo dài duy trì nhiệt độ từ 40°C trở lên)

(*) Nhiệt độ và thời gian tối đa hiển thị là Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản, nhiệt độ trung bình là giá trị đo được dựa trên quy định của Thủ đô Tokyo nên có thể có chênh lệch nhỏ tùy theo điều kiện sử dụng.

Thông tin liên hệ và giải đáp thắc mắc

*Lapahot® là nhãn hiệu được đăng ký chung của Đại học Osaka và Daiei Co., Ltd.

amethyst 大衛株式会社

- | | | | | | |
|------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| ☐ 札幌 | TEL.011-817-3600 | ☐ 南関東 | TEL.03-5981-7180 | ☐ 広島 | TEL.082-211-2166 |
| ☐ 仙台 | TEL.022-207-3780 | ☐ 名古屋 | TEL.052-369-4110 | ☐ 福岡 | TEL.092-622-8415 |
| ☐ 東京 | TEL.03-5981-7180 | ☐ 学研都市 | TEL.072-856-6531 | ☐ コンシューマ事業本部 | |
| ☐ 北関東 | TEL.03-5981-7180 | ☐ 大阪 | TEL.06-6928-7245 | | TEL.052-355-2711 |



アメジスト 大衛 検索
https://amethyst.co.jp

2023.03